

Terapia trudno gojących się ran

Rozwiązania firmy Mölnlycke



Poznaj Technologię Safetac®

Zastosowana w produktach Mölnlycke adhezyjna technologia Safetac® znacząco minimalizuje ból pacjenta oraz uszkodzenia skóry i tkanek.




Opatrunki z tradycyjną warstwą przylepną powodują bolesne zrywanie komórek naskórka.



Opatrunki z technologią Safetac® nie zrywają komórek naskórka ani nie powodują bólu przy zdejmowaniu opatrunku.

- 1 Dzięki swoim właściwościom adhezyjnym i prawidłowemu zarządzaniu wysiękiem minimalizuje zjawisko maceracji tkanek.
- 2 Podczas zdejmowania lub reaplikacji opatrunku z warstwą kontaktową Safetac® nie dochodzi do uszkodzenia łożyska rany ani skóry wokół, dzięki temu zmiana opatrunku jest bezbolesna.
- 3 Safetac® minimalizuje uszkodzenia naskórka i zapewnia lepszą kondycję skóry. Zalecany jest pacjentom z pergaminową, delikatną skórą, jak również pacjentom, u których występuje ryzyko pojawienia się odleżyn.
- 4 Safetac® pochłania energię sił ścinających, zmniejszając ich działanie na skórę.
- 5 Safetac® zapewnia leczenie ran zgodnie ze strategią TIME i zasadami wilgotnego zarządzania raną.

OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE / NA RANĘ Z CECHAMI INFЕКCJI

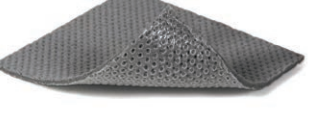Nazwa produktu	Charakterystyka produktu	Wskazania	Rozmiar (cm)
Mepilex® Ag  	Do ran z cechami infekcji o średnim wysięku. Działanie bójce wobec szerokiej gamy drobnoustrojów nawet w 7 dobie, potwierdzone badaniami in vitro. Opatrunek z pianki poliuretanowej z siarczanem srebra i węglem aktywowanym (niweluje przykry zapach) rozmieszczonymi w całej strukturze opatrunku, z silikonową warstwą kontaktową Safetac® zapewniającą przyleganie, a nie przyklejanie, co zapewnia atraumatyczną zmianę opatrunku i zmniejszenie ryzyka maceracji do minimum	Powierzchniowe rany ostre i przewlekłe, z cechami infekcji lub zagrożone infekcją, w fazie wysiękowej o różnej etiologii tj. owrzodzenia podudzi, stopa cukrzycowa, odleżyny, oparzenia II stopnia, powiktane rany pooperacyjne. Stosowany w połączeniu z kompresjoterapią.	6 x 8,5  10 x 10  10 x 21  12,5 x 12,5  15 x 15  17,5 x 17,5  20 x 20  20 x 50 
Mepilex® Border Ag  	Wielowarstwowy superchłonny opatrunek do ran z cechami infekcji o dużym wysięku. Działanie bójce wobec szerokiej gamy drobnoustrojów nawet w 7 dobie, potwierdzone badaniami in vitro. 5-warstwowa budowa i warstwa superabsorbentu z włóknami poliakrylanu zapewniają wysoką chłonność, retencję i równomierne rozprrowadzenie wysięku. Wodoodporny. Border - obramowanie zapewnia trwałą, ale nietraumatyczną adhezję, dzięki silikonowej warstwie kontaktowej Safetac® zapewniającej przyleganie, a nie przyklejanie oraz zmniejszenie ryzyka maceracji do minimum. Z siarczanem srebra i węglem aktywowanym (niweluje przykry zapach)	Rany ostre i przewlekłe, z cechami infekcji lub zagrożone infekcją, ze średnim i dużym wysiękiem, o różnej etiologii, wymagające utrzymania optymalnego, wilgotnego środowiska przy jednoczesnym prawidłowym zarządzaniu wysiękiem tj. owrzodzenia podudzi, stopa cukrzycowa, odleżyny, oparzenia II stopnia niepełnej grubości skóry, rany ostre i pooperacyjne. Stosowany w połączeniu z kompresjoterapią.	10 x 10  10 x 20  10 x 25  10 x 30  12,5 x 12,5  15 x 15  17,5 x 17,5 
Mepilex® Transfer Ag  	Opatrunek pierwotny w postaci miękkiej cienkiej pianki poliuretanowej z siarczanem srebra i węglem aktywowanym, transferujący wysięk do opatrunku wtórnego. Do ran z cechami infekcji o różnym stopniu wysięku. Działanie bójce wobec szerokiej gamy drobnoustrojów nawet w 14 dobie, potwierdzone badaniami in vitro. Opatrunek z warstwą kontaktową z miękkiego silikonu Safetac®, zapewniającą przyleganie, a nie przyklejanie, przenoszący wysięk do opatrunku wtórnego. Safetac® umożliwia atraumatyczną zmianę opatrunku i zmniejszenie ryzyka maceracji do minimum. Możliwość docinania. Do 14 dni.	Powierzchniowe rany ostre i przewlekłe z cechami infekcji lub zagrożone infekcją, o różnym stopniu wysięku tj. owrzodzenia podudzi, owrzodzenia w zespole stopy cukrzycowej, oparzenia I i II, odleżyny, rany nowotworowe, rany pourazowe, rany powstałe w wyniku radioterapii i miejsca pobrania przeszczepu, rany z infekcją w przebiegu Epidermolysis bullosa. Stosowany w połączeniu z kompresjoterapią.	7,5 x 8,5  10 x 12,5  12,5 x 12,5  15 x 20  20 x 50 
Exufiber® Ag+ NOWOŚĆ  	Opatrunek włóknisty (technologia Hydrolock®) z gęsto splecionych włókien alkoholu poliwinylowego o bardzo dużej absorpcji i retencji z siarczanem srebra do ran z cechami infekcji, powierzchniowych i głębokich w tym tuneli, kieszeni, przetok. W kontakcie z wysiękiem żeluje zachowując trwałą, nienaruszoną strukturę, co umożliwia usunięcie opatrunku w jednym kawałku. Działanie bójce wobec szerokiej gamy drobnoustrojów nawet w 7 dobie, potwierdzone badaniami in vitro. Wykazuje działanie przeciw odbudowaniu się biofilmu drobnoustrojów (potwierdzone badaniami in vivo).	Powierzchniowe rany ostre i przewlekłe, rany głębokie z cechami infekcji lub zagrożone infekcją (tunele, kieszenie, przetoki). Do ran ze średnim oraz dużym wysiękiem tj. owrzodzenia podudzi, owrzodzenia w zespole stopy cukrzycowej, odleżyny.	2 x 45  4,5 x 10  4,5 x 20  4,5 x 30  5 x 5  10 x 10  15 x 15  20 x 30 

R - opatrunki refundowane

KOMPRESJOTERAPIA

Nazwa produktu	Charakterystyka produktu	Wskazania	Rozmiar (cm)
Setopress® 	Bandaż kompresyjny z kolorowymi znacznikami ułatwiającymi aplikację. Dwa różne poziomy kompresji ok. 30 lub 40 mmHg. Stopniowana kompresja zalecana w leczeniu obrzęku kończyn dolnych i związanych z tym owrzodzeń żylnych. Możliwe pranie produktu.	Bandaż Setopress® przeznaczony jest do leczenia owrzodzeń żylnych kończyn dolnych i zaburzeń, wymagających stopniowanego ucisku podudzi. Ze względu na łatwość aplikacji, możliwe jest samodzielne zakładanie bandaża.	10 x 350

OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE / NA RANĘ BEZ CECH INFЕКCJI

Nazwa produktu	Charakterystyka produktu	Wskazania	Rozmiar (cm)
Mepilex®  	Miękki, chłonny opatrunek z pianki poliuretanowej z silikonową warstwą kontaktową Safetac®, zapewniającą przyleganie, a nie przyklejanie co zapewnia atraumatyczną zmianę opatrunku i zmniejszenie ryzyka maceracji do minimum. Do ran o średnim wysięku. Możliwość docinania.	Powierzchniowe rany ostre i przewlekłe ze średnią ilością wysięku tj. owrzodzenia podudzi, owrzodzenia nowotworowe, stopa cukrzycowa, oparzenia II stopnia, odleżyny, rany pourazowe, rozdarcia skóry, rany powstałe w wyniku radioterapii, rany w przebiegu Epidermolysis bullosa. Opatrunek Mepilex® może być stosowany jako ochrona zagrożonej i/lub wrażliwej skóry oraz można stosować jako element profilaktyki uszkodzeń skóry, np. odleżyn. Opatrunek Mepilex® może być stosowany w połączeniu z kompresjoterapią oraz w połączeniu z żelami.	5 x 5 10 x 10 10 x 12 10 x 20 10 x 21 12 x 20 12,5 x 12,5 15 x 15 17,5 x 17,5 20 x 20 20 x 50 21 x 22 R R R R
Mepilex® EM  	Cienki, elastyczny opatrunek z pianki poliuretanowej z silikonową warstwą kontaktową Safetac® zapewniającą przyleganie, a nie przyklejanie, co zapewnia atraumatyczną zmianę opatrunku i zmniejszenie ryzyka maceracji do minimum. Do ran suchych lub o małym wysięku. Idealny do ran w ostatnim stadium gojenia - ran ziarninujących i naskórkujących. Potwierdzone klinicznie działanie w prewencji odczynów popromiennych. Możliwość docinania.	Powierzchniowe rany ostre i przewlekłe o małym wysięku tj. owrzodzenia goleni o różnej etiologii (żylne i tętnicze), stopa cukrzycowa, odleżyny, rany w fazie ziarninowania i naskórkowania, prewencja i leczenie ran po radioterapii, ochrona wrażliwej skóry. Rany w przebiegu Epidermolysis bullosa. Mepilex® EM można również używać jako ochrony uszkodzonej i/lub wrażliwej skóry. Opatrunek Mepilex® EM może być stosowany w połączeniu z kompresjoterapią oraz w połączeniu z żelami.	7,5 x 8,5 12,5 x 12,5 17,5 x 17,5 R R R
Mepilex® Transfer  	Cienki, delikatny, elastyczny opatrunek z pianki poliuretanowej z silikonową warstwą kontaktową Safetac®, przenoszący wysięk do opatrunku wtórnego. Do ran o różnym stopniu wysięku, trudnych do zaopatrzenia. Safetac® umożliwia atraumatyczną zmianę opatrunku i zmniejszenie ryzyka maceracji do minimum. Zalecany pacjentom z Epidermolysis bullosa i z delikatną pergaminową skórą. Możliwość docinania.	Powierzchniowe rany ostre i przewlekłe o różnym stopniu wysięku tj. owrzodzenia podudzi, owrzodzenia w zespole stopy cukrzycowej, oparzenia I i II stopnia, odleżyny, rany nowotworowe, rany pourazowe, rany powstałe w wyniku radioterapii, rany w przebiegu Epidermolysis bullosa. Opatrunek Mepilex® Transfer może być stosowany w połączeniu z kompresjoterapią oraz żelami.	7,5 x 8,5 10 x 12 15 x 20 20 x 50 R
Mepilex® Talon  	Miękki, chłonny opatrunek z pianki poliuretanowej na pięcie/tokcie z silikonową warstwą kontaktową Safetac®, zapewniającą przyleganie, a nie przyklejanie, co zapewnia atraumatyczną zmianę opatrunku i zmniejszenie ryzyka maceracji do minimum. Do ran o średnim wysięku. Możliwość docinania.	Powierzchniowe rany ostre i przewlekłe o średnim wysięku zlokalizowane w obrębie pięty i tokcia tj. odleżyny, owrzodzenia cukrzycowe, rany pourazowe, rany w przebiegu Epidermolysis bullosa.	13x21 R

Mepitel® 	Transparentny opatrunek siatkowy pokryty z dwóch stron warstwą kontaktową z miękkiego silikonu Safetac®. Do ran zarówno z wysiękiem małym jak i dużym. Umożliwia transfer wysięku do opatrunku wtórnego, chroni ranę i jej brzegi przed niekorzystnym działaniem wysięku i maceracją. Możliwe docinanie. Możliwa aplikacja preparatów terapeutycznych w tym żeli. Dzięki swoim właściwościom stosowany jest głównie jak ochrona przeszczepu i miejsca pobrania przeszczepu skóry. Nawet do 14 dni.	Powierzchniowe rany ostre i przewlekłe tj. owrzodzenia podudzi, oparzenia II stopnia, rany pooperacyjne, zerwania i otarcia naskórka, przeszczepy skóry, rany pourazowe, ochrona wrażliwej skóry, ochrona ziarniny i ran w fazie epitelizacji. Rany w przebiegu Epidermolysis bullosa. Opatrunek Mepitel® może być również używany jako warstwa ochronna na rany bez wysięku np. pęcherze, delikatną, pergaminową skórę oraz odstąpnięte tkanki. Może być stosowany pod bandażem uciskowym. Mepitel® może być stosowany wraz z metodą leczenia ran za pomocą podciśnienia (NPWT).	5 x 7,5 7,5 x 10 10 x 18 20 x 30
Exufiber®  	Opatrunek włóknisty (technologia Hydrolock®) z gęsto splecionych włókien alkoholu poliwinylowego o bardzo dużej absorpcji i retencji do ran powierzchniowych i głębokich w tym tuneli, kieszeni, przetok. W kontakcie z wysiękiem żeluje zachowując trwałą, nienaruszoną strukturę, co umożliwia usunięcie opatrunku w jednym kawałku.	Powierzchniowe i głębokie rany ostre i przewlekłe ze średnim i dużym wysiękiem tj. owrzodzenia kończyn dolnych i stóp, odleżyny, oparzenia niepełnej grubości skóry, rany pooperacyjne, miejsca pobrania skóry do przeszczepu, rany nowotworowe, rany pourazowe, przetoki, kieszenie.	2 x 45 4,5 x 10 4,5 x 20 4,5 x 30 5 x 5 10 x 10 15 x 15 20 x 30
Mextra® Superabsorbent  	Superchłonny wielowarstwowy opatrunek w postaci kompresu z rdzeniem z superabsorbentu (SAP) z włóknami poliakrylanu o wysokiej absorpcji i retencji oraz potwierdzonych badaniami właściwościami modulującymi aktywność metaloproteinaz.	Stosowany jako opatrunek pierwotny lub wtórny o wysokim stopniu absorpcji i retencji wysięku. Do ran ze średnim oraz dużym wysiękiem, szczególnie zalecany do owrzodzeń podudzi na tle niewydolności żyłnej, w sączących ranach nowotworowych, oparzeniach.	10 x 10 10 x 15 10 x 20 12,5 x 12,5 12,5 x 17,5 12,5 x 22,5 15 x 20 17,5 x 22,5 20 x 25 20 x 30 20 x 40 22,5 x 27,5 22,5 x 32,5 22,5 x 42,5

R - opatrunki refundowane

OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE / NA RANĘ POOPERACYJNĄ

Nazwa produktu	Charakterystyka produktu	Wskazania	Rozmiar (cm)
Mepilex® Border Post-OP  	Wielowarstwowy opatrunek na rany pooperacyjne z przezroczystym, wodoodpornym obramowaniem, wchłaniający krew i wysięk. Potwierdzona badaniami redukcja ryzyka infekcji rany pooperacyjnej. Dzięki Technologii Flex® opatrunek cechuje się dużą elastycznością i umożliwia natychmiastową rehabilitację. Warstwa superabsorbentu z włókien poliakrylanu zapewnia wysoką absorpcję i retencję wysięku i krwi. Silikonowa warstwa kontaktowa Safetac® zapewnia atraumatyczną zmianę opatrunku, zmniejszenie ryzyka maceracji, a w rezultacie brak uszkodzeń skóry, co zmniejsza ryzyko ZMO.	Rany pooperacyjne, z różnym stopniem wysięku, szczególnie zalecany do ran po operacji kolana, uda, biodra i klatki piersiowej.	6x8 9x10 10x15 10x20 10x25 10x30 10x35

PIELĘGNACJA I PŁUKANIE RAN, KONTROLA OBCIĄŻENIA MIKROBIOLOGICZNEGO


Nazwa produktu	Charakterystyka produktu	Wskazania	Rozmiar
 Granudacyn® - roztwór	Granudacyn® to roztwór na bazie kwasu podchlorawego (HOCl/NaOCl), który jest stosowany do oczyszczania i nawilżania różnego rodzaju ran.	Rany przewlekłe, ostre, chirurgiczne oraz zanieczyszczone a także oparzenia pierwszego i drugiego stopnia, wrażliwe tkanki takie jak chrząstki, ścięgna, więzadła i kości, rany w uchu, jamie ustnej oraz przetoki.	Pojemność: 250 ml spray 500 ml 1000 ml Pojemność: 500 ml NPWT 1000 ml NPWT
 Granudacyn® - żel	Granudacyn® to żel na bazie kwasu podchlorawego (HOCl/NaOCl), który jest stosowany do oczyszczania i nawilżania różnego rodzaju ran.	Rany przewlekłe, ostre, chirurgiczne oraz zanieczyszczone a także oparzenia pierwszego i drugiego stopnia, wrażliwe tkanki takie jak chrząstki, ścięgna, więzadła i kości, rany w uchu, jamie ustnej oraz przetoki.	Pojemność: 50 g 100 g 250 g
 Granulox®	Hemoglobina w aerozolu do miejscowego stosowania w terapii ran przewlekłych. Poprawia utlenowanie tkanek łożyska rany, przyspieszając procesy gojenia.	Rany przewlekłe np. żyłne, tętnicze i mieszane owrzodzenia goleni, owrzodzenia w zespole stopy cukrzycowej, odleżyny, powikłane rany operacyjne.	Pojemność: 12 ml

PIELĘGNACJA WYMAGAJĄCEJ SKÓRY

Nazwa produktu	Charakterystyka produktu	Wskazania	Rozmiar
Epaderm® Ointment 	Emolient w postaci maści do pielęgnacji suchej skóry o potrójnym zastosowaniu: idealny do kąpieli, do mycia i bezpośrednio na skórę. Wyrób medyczny dedykowany pacjentom z AZS, egzemą, łuszczycą i innymi schorzeniami, którym towarzyszy nadmierne wysuszenie skóry. Dedykowany wszystkim grupom wiekowym, w tym niemowlętom.	Codzienna pielęgnacja i terapia delikatnej i wymagającej skóry u pacjentów chorujących na: • Atopowe zapalenie skóry (AZS) • Pęcherzowe oddzielanie naskórka (Epidermolysis bullosa) • Łuszczyca • Podrażnienia i otarcia, egzemy • Rany i owrzodzenia • Odczyny popromienne i oparzenia	Pojemność: 25 g 125 g 500 g
 Epaderm® Cream	Emolient w postaci kremu do pielęgnacji suchej skóry o podwójnym zastosowaniu: jako krem lub jako środek myjący. Wyrób medyczny dedykowany pacjentom z AZS, egzemą, łuszczycą i innymi schorzeniami, którym towarzyszy nadmierne wysuszenie skóry. Dedykowany wszystkim grupom wiekowym, w tym niemowlętom.	Codzienna pielęgnacja i terapia delikatnej i wymagającej skóry u pacjentów chorujących na: • Atopowe zapalenie skóry (AZS) • Pęcherzowe oddzielanie naskórka (Epidermolysis bullosa) • Łuszczyca • Podrażnienia i otarcia, egzemy • Rany i owrzodzenia • Odczyny popromienne i oparzenia	Pojemność: 50 g 150 g 500 g
Mepitac® 	Opatrunek mocujący z warstwą adhezyjną z miękkiego silikonu Safetac®. Do mocowania drenów, kaniul, opatrunków, cewników. Zalecany pacjentom o delikatnej pergaminowej skórze.	Mocowanie przewodów, drenów, cewników, opatrunków, elektrod, kaniul dożylnych. Szczególnie zalecany dla pacjentów o wrażliwej, skłonnej do podrażnień i suchej skórze.	Rozmiar w cm 2 x 300 4 x 150

Tubifast® Two Way Stretch - bandaże (opaski) mocujące opatrunki o długości 10 m 	Rozciągliwe w dwóch kierunkach bandaże (opaski) mocujące opatrunki, stosowane w owrzodzeniach przewlekłych, AZS, łuszczycy, Epidermolysis bullosa. Umożliwiają łatwe mocowanie opatrunków na dużych, ciężkich do zaopatrzenia powierzchniach ciała. • Łatwe i komfortowe mocowanie opatrunków • Możliwość stosowania tzw. mokrych opatrunków • Ochrona i zabezpieczenie dużych powierzchni ciała • Ochrona skóry w miejscach ciężkich do zaopatrzenia tj. szyja, łokieć, kolana, pachwiny, głowa • Pełny zakres ruchów, dzięki technologii 2 – Way Stretch	Ochrona skóry w miejscach ciężkich do zaopatrzenia tj. szyja, łokieć, kolana, pachwiny, głowa w postaci tzw. opatrunków na mokro lub sucho. Opaski mocujące opatrunki stosowane w owrzodzeniach łydki, żylnych, tętniczych, mieszanych, na stopie w ZSC, odczynach popromiennych, oparzeniach ciała, AZS, łuszczycy, Epidermolysis bullosa.	Szerokość w cm (kolor): 3,5 (czerwony) 5 (zielony) 7,5 (niebieski) 10,75 (żółty) 20 (fioletowy)
Tubifast® Two Way Stretch VEST - koszulki mocujące opatrunki 	Rozciągliwe w dwóch kierunkach koszulki mocujące opatrunki, stosowane w owrzodzeniach przewlekłych, AZS, łuszczycy, Epidermolysis bullosa. Umożliwiają łatwe mocowanie opatrunków na dużych, ciężkich do zaopatrzenia powierzchniach ciała np. tułowiu, dołach pachowych, szyi.	Ochrona skóry i mocowanie opatrunków w miejscach ciężkich do zaopatrzenia np. szyja, tył, doły pachowe, plecy. Mogą być stosowane w postaci tzw. opatrunków na mokro lub sucho, lub jako mocowanie opatrunków np. w odczynach popromiennych, oparzeniach ciała, AZS, łuszczycy, Epidermolysis bullosa.	Rozmiar dopasowany do wieku: 6-24 miesiące 2-5 lat 5-8 lat 8-11 lat 11-14 lat
Tubifast® Two Way Stretch - legginsy mocujące opatrunki 	Rozciągliwe w dwóch kierunkach legginsy mocujące opatrunki, stosowane w owrzodzeniach przewlekłych, AZS, łuszczycy, Epidermolysis bullosa. Umożliwiają łatwe mocowanie opatrunków na dużych, ciężkich do zaopatrzenia powierzchniach ciała np. pachwiny, kolana, pośladki, uda.	Ochrona skóry i mocowanie opatrunków w miejscach ciężkich do zaopatrzenia np. kolana, pośladki, uda, doły podkolanowe, pachwiny. Mogą być stosowane w postaci tzw. opatrunków na mokro lub sucho lub jako mocowanie opatrunków np. w odczynach popromiennych, oparzeniach ciała, AZS, łuszczycy, Epidermolysis bullosa, owrzodzeniach łydki, pośladków etc.	Rozmiar dopasowany do wieku: 6-24 miesiące 2-5 lat 5-8 lat 8-11 lat 11-14 lat
Tubifast® Two Way Stretch Gloves - rękawiczki mocujące opatrunki 	Rozciągliwe w dwóch kierunkach rękawiczki mocujące opatrunki, stosowane w owrzodzeniach przewlekłych, AZS, łuszczycy, Epidermolysis bullosa. Umożliwiają łatwe mocowanie opatrunków w przestrzeniach międzypalcowych dłoni.	Ochrona skóry i mocowanie opatrunków na dłoni, w tym w przestrzeniach międzypalcowych. Mogą być stosowane w postaci tzw. opatrunków na mokro lub sucho lub jako mocowanie opatrunków np. w odczynach popromiennych, oparzeniach ciała, AZS, łuszczycy, Epidermolysis bullosa.	Rozmiar: XS Child S Child M/L Child S/M Adult M/L Adult
Tubifast® Two Way Stretch Socks - skarpetki mocujące opatrunki 	Rozciągliwe w dwóch kierunkach skarpetki mocujące opatrunki, stosowane w owrzodzeniach przewlekłych, AZS, łuszczycy, Epidermolysis bullosa. Umożliwiają łatwe mocowanie opatrunków w przestrzeniach międzypalcowych stóp, na pięcie, podbiciu stopy.	Ochrona skóry i mocowanie opatrunków na stopie, w tym w przestrzeniach międzypalcowych, pięcie, podbiciu. Mogą być stosowane w postaci tzw. opatrunków na mokro lub sucho lub jako mocowanie opatrunków np. w owrzodzeniach stopy, oparzeniach, AZS, łuszczycy, Epidermolysis bullosa.	One Size (uniwersalne)

PREWENCJA I TERAPIA ODLEŻYN I CIĘŻKICH DO ZAOPATRZENIA RAN

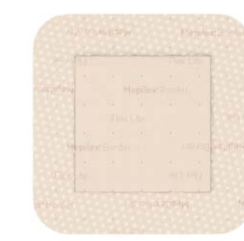Nazwa produktu	Charakterystyka produktu	Wskazania	Rozmiar
Mepilex® Border Sacrum Technologia Deep Defense  	5-warstwowy, wodoodporny opatrunek z obramowaniem w kształcie umożliwiającym zaopatrzenie kości krzyżowej. Innowacyjna Technologia Deep Defense, zapewnia elastyczność i dopasowanie opatrunku oraz redystrybucję sił generujących odleżyny. Dzięki 3 warstwom zarządzającym wysiękiem w tym superabsorbentem z włókien poliakrylanu wchłania i zatrzymuje wysięk oraz utrzymuje wilgotne środowisko rany. Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu Safetac® uszczelnia brzegi rany, zapobiega wyciekaniu wysięku na otaczającą skórę, minimalizując ryzyko maceracji. Warstwa Safetac® umożliwia zmianę opatrunku bez uszkodzania rany i otaczającej skóry oraz bez narażania pacjenta na dodatkowy ból. Stosowany w prewencji i terapii odleżyn z małym i dużym wysiękiem głównie na kości krzyżowej. Innowacyjna Technologia Deep Defense, zapewnia potwierdzone kliniczne 5 razy niższe ryzyko wystąpienia odleżyn na OIT.	Prewencja i leczenie odleżyn w okolicy kości krzyżowej. Można stosować na rany suche/nekrotyczne w połączeniu z opatrunkami żelowymi.	16 x 20 22 x 25
Mepilex® Border Sacrum Ag  	5-warstwowy, wodoodporny opatrunek z siarczanem srebra i węglem aktywowanym, obramowaniem w kształcie umożliwiającym zaopatrzenie kości krzyżowej. Dzięki 3 warstwom zarządzającym wysiękiem w tym superabsorbentem z włókien poliakrylanu wchłania i zatrzymuje wysięk oraz utrzymuje wilgotne środowisko rany. Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu Safetac® uszczelnia brzegi rany, zapobiega wyciekaniu wysięku na otaczającą skórę, minimalizując ryzyko maceracji. Warstwa Safetac® umożliwia zmianę opatrunku bez uszkodzania rany i otaczającej skóry oraz bez narażania pacjenta na dodatkowy ból. Stosowany w prewencji i terapii odleżyn z cechami infekcji, z małym i dużym wysiękiem głównie na kości krzyżowej.	Terapia odleżyn z cechami infekcji umieszczonych na kości krzyżowej ze średnim i dużym wysiękiem.	18 x 18 23 x 23
Mepilex® Border Heel Technologia Deep Defense  	5-warstwowy, wodoodporny opatrunek z obramowaniem w kształcie umożliwiającym zaopatrzenie kości pięty. Innowacyjna Technologia Deep Defense, zapewnia elastyczność i dopasowanie opatrunku oraz redystrybucję sił generujących odleżyny. Dzięki 3 warstwom zarządzającym wysiękiem w tym superabsorbentem z włókien poliakrylanu wchłania i zatrzymuje wysięk oraz utrzymuje wilgotne środowisko rany. Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu Safetac® uszczelnia brzegi rany, zapobiega wyciekaniu wysięku na otaczającą skórę, minimalizując ryzyko maceracji. Warstwa Safetac® umożliwia zmianę opatrunku bez uszkodzania rany i otaczającej skóry oraz bez narażania pacjenta na dodatkowy ból. Stosowany w prewencji i terapii odleżyn z małym i dużym wysiękiem głównie na kości pięty. Innowacyjna Technologia Deep Defense, zapewnia potwierdzone kliniczne 5 razy niższe ryzyko wystąpienia odleżyn na OIT.	Prewencja i leczenie odleżyn w okolicy kości pięty. Można stosować na rany suche/nekrotyczne w połączeniu z opatrunkami żelowymi.	22 x 23
Mepilex® Border Flex  	5-warstwowy, wodoodporny opatrunek z obramowaniem i superabsorbentem z włóknami poliakrylanu. Dzięki Technologii Flex, zapewnia optymalne dopasowanie do ciężkich do zaopatrzenia miejsc, wymagających trwałego, atryumatycznego mocowania, np. dół pachowy, dół pachwinowy, szyja. Przeznaczony do ran bez cech infekcji. Posiada warstwę kontaktową z miękkiego silikonu Safetac® która uszczelnia brzegi rany, zapobiega wyciekaniu wysięku na otaczającą skórę, minimalizując ryzyko maceracji. Warstwa Safetac® umożliwia zmianę opatrunku bez uszkodzania rany i otaczającej skóry oraz bez narażania pacjenta na dodatkowy ból. Opatrunek dostępny jest w wersji klasycznej i wersji oval.	Opatrunek Mepilex® Border Flex jest przeznaczony do wielu rodzajów ran z wysiękiem, tj. odleżyny, owrzodzenia kończyn dolnych i stóp, rany pourazowe (np. rozdarcia skóry) i rany chirurgiczne. Opatrunek Mepilex® Border Flex można również stosować na rany suche/nekrotyczne w połączeniu z żelami. Idealnie nadaje się do ruchomych, trudnych miejsc np. dół pachowy, pachwina, podbicie stopy, szyja. Opatrunek Mepilex® Border Flex pomaga zredukować ryzyko wystąpienia pęcherzy pooperacyjnych i może być stosowany jako element profilaktyki uszkodzeń skóry, np. odleżyn.	Mepilex® Border Flex 7,5 x 7,5 10 x 10 10 x 20 10 x 25 10 x 30 12,5 x 12,5 15 x 15 15 x 20 Mepilex® Border Flex Oval 7,8 x 10 13 x 16 15 x 19
Mepilex® Border Flex Lite  	4-warstwowy, wodoodporny opatrunek z obramowaniem i elastyczną, ponacinaną wyspą opatrunkową skonstruowaną w technologii Flex. Do ran z małym wysiękiem. Technologia Flex zapewnia stabilność i trwałość opatrunku przy jednoczesnym komforcie ruchomych miejsc ciała np. stawów czy pachwin. Zbudowana z 4 warstw części chłonna charakteryzuje się wysoką retencją, i dopasowaniem nawet podczas ruchu. Posiada warstwę kontaktową z miękkiego silikonu Safetac® która uszczelnia brzegi rany, zapobiega wyciekaniu wysięku na otaczającą skórę, minimalizując ryzyko maceracji oraz umożliwia zmianę opatrunku bez uszkodzania rany i otaczającej skóry wokół bez narażania pacjenta na dodatkowy ból. Posiada znaczniki nasiąknięcia opatrunku.	Opatrunek Mepilex® Border Flex Lite jest przeznaczony do wielu rodzajów ran bez lub z umiarkowanym wysiękiem, takich jak owrzodzenia kończyn dolnych i stóp, rany chirurgiczne oraz pourazowe, takie jak otarcia, pęcherze i przerwanie ciągłości skóry (Skin tears). Opatrunek Mepilex® Border Flex Lite można również używać jako ochrony uszkodzonej i (lub) delikatnej skóry. Nadaje się do ruchomych, trudnych miejsc np. dół pachowy, pachwina, podbicie stopy, szyja. Opatrunek Mepilex® Border Flex pomaga zredukować ryzyko wystąpienia pęcherzy pooperacyjnych i może być stosowany jako element profilaktyki uszkodzeń skóry, np. odleżyn.	4 x 5 5 x 12,5 7,5 x 7,5 10 x 10 15 x 15
Mepitel® One 	Transparentny opatrunek siatkowy pokryty z jednej strony warstwą kontaktową z miękkiego silikonu Safetac®. Do ran zarówno z wysiękiem małym jak i dużym. Umożliwia transfer wysięku do opatrunku wtórnego, chroni ranę i jej brzegi przed niekorzystnym działaniem wysięku i maceracji. Możliwa aplikacja preparatów terapeutycznych w tym żeli. Dzięki swoim właściwościom stosowany jest głównie jak ochrona przeszczepu i miejsca pobrania przeszczepu skóry. Nawet do 14 dni. Zalecany przez międzynarodowe konsensusy jako wybór w prewencji i terapii skin tears – czyli uszkodzeń, rozdarć skóry głównie u osób starszych z pergaminową delikatną skórą.	Powierzchniowe rany ostre i przewlekłe tj. owrzodzenia podudzi, oparzenia II stopnia, rany pooperacyjne, zerwania i otarcia naskórka, przeszczepy skóry, rany pourazowe, ochrona wrażliwej skóry, ochrona ziarniny i ran w fazie epitelizacji. Prewencja otarć i uszkodzeń skóry takich jak skin tears, odleżyny np. na łopatkach. Stosowany w przebiegu Epidermolysis bullosa.	5 x 7,5 7,5 x 10 10 x 18 17 x 25

TERAPIA PODCIŚNIENIOWA LECZENIA RAN / AVANCE® SOLO

Nazwa produktu	Charakterystyka produktu	Wskazania	Zawartość
Opatrunki Avance® Solo 	Opatrunek Avance® Solo z przezroczystym obramowaniem to jednorazowy oddychający, miękki, chłonny opatrunek z silikonową warstwą kontaktową Safetac® która zapewnia atraumatyczną zmianę opatrunku, zmniejszenie ryzyka maceracji, oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia ZMO. Posiada dren z podwójnym światłem.	Rany przewlekłe, ostre, pourazowe i podostre których brzegi ran się rozeszły, owrzodzeń (w tym cukrzycowych, żylnych i odleżynowych), zamkniętych ran chirurgicznych, naderwanych fragmentów skóry oraz miejsc przeszczepów skóry.	Opatrunki pakowane po 2 sztuki w rozmiarach: 10 x 20 10 x 30 10 x 35 15 x 15 15 x 20 15 x 30 20 x 20 25 x 25
Zestaw Avance® Solo: pompa, kanister i opatrunek 	Zestaw Avance® Solo składa się z pompy, kanistra (50ml) , opatrunku z obramowaniem które razem tworzą system podciśnieniowego leczenia ran. Zapewnia stałe podciśnienie -125 mmHg niezależnie od wysięku, nawet gdy opatrunek jest nasycony. Wyposażony w alarmy wizualne i dźwiękowe (wyciek, blokada, rozszczelnienie, niski poziom baterii). System kontrolowanego przepływu powietrza CFM.	Przeznaczony do usuwania wysięku z ran przewlekłych, ostrych, pourazowych i podostrych, ran, których brzegi się rozeszły, owrzodzeń (w tym cukrzycowych, żylnych i odleżynowych), zamkniętych ran chirurgicznych, naderwanych fragmentów skóry oraz miejsc przeszczepów skóry.	Zawartość: Pompa wraz z uchwytem Kanister 50 ml 4 baterie AA 1 opatrunek w wybranym rozmiarze: 10 x 20 10 x 30 10 x 35
Zestaw Avance® Solo: pompa i kanister 	Zasilana bateriami pompa jednorazowego użytku o czasie eksploatacji wynoszącym 14 dni, obsługiwana za pomocą jednego przycisku, z alarmami wizualnymi oraz dźwiękowymi. Kanister Avance® Solo to mocowany do pompy pojemnik jednorazowego użytku (50 ml), przeznaczony do zbierania wysięku z rany. Generuje podciśnienie -125 mmHg. W połączeniu z opatrunkiem Avance® Solo tworzy system przenośnej terapii podciśnieniowej. System posiada uchwyt do pompy.	Przeznaczony do ran przewlekłych, ostrych, pourazowych i podostrych, ran, których brzegi się rozeszły, owrzodzeń (w tym cukrzycowych, żylnych i odleżynowych), zamkniętych ran chirurgicznych, naderwanych fragmentów skóry oraz miejsc przeszczepów skóry.	Zawartość: Pompa wraz z uchwytem Kanister 50 ml 4 baterie AA
Kanister Avance® Solo 	Kanister Avance® Solo to mocowany do pompy pojemnik jednorazowego użytku, przeznaczony do zbierania wysięku z rany (50 ml). Zawiera w środku żelujące włókna wiążące wysięk.	Do stosowania wraz z pompą Avance® Solo w terapii podciśnieniowej leczenia ran – do ran przewlekłych, ostrych, pourazowych i podostrych, ran, których brzegi się rozeszły, owrzodzeń (w tym cukrzycowych, żylnych i odleżynowych), zamkniętych ran chirurgicznych, naderwanych fragmentów skóry oraz miejsc przeszczepów skóry.	Pojemność: 50 ml
Gąbka Avance® Solo 	Gąbka Avance® Solo jednorazowego użytku zbudowana z poliuretanu do wypełniania ran.	Do wypełnienia łóżyska rany z możliwością docięcia.	1,5 x 10 x 12

TERAPIA PODCIŚNIENIOWA LECZENIA RAN / AVANCE® SOLO ADAPT

Nazwa produktu	Charakterystyka produktu	Wskazania	Zawartość
Zestaw Avance® Solo Adapt: Pompa, kanister, opatrunek 	System podciśnieniowego leczenia ran Avance® Solo Adapt składa się z pompy, kanistra, opatrunku foliowego, portu transferowego oraz gąbki które wspólnie tworzą system przeznaczony do leczenia ran. Zestaw zapewnia stałe regulowane podciśnienie -125 mmHg niezależnie od wysięku.	System podciśnieniowej terapii do odprowadzania wysięku z ran głębokich - odleżyn.	Zawartość: Pompa wraz z uchwytem Gąbka w rozmiarze: 8 x 10 x 3 Kanister 50 ml 4 baterie AA Opatrunek w rozmiarze: 20 x 27
Zestaw opatrunkowy Avance® Solo Adapt 	Zestaw składający się z jednorazowego portu transferowego, opatrunku foliowego, którego zadaniem jest odprowadzanie wysięku oraz jednorazowej gąbki zbudowanej z poliuretanu do wypełniania żyzyska rany z możliwością docięcia. Opatrunek foliowy posiada warstwę kontaktową Safetac® która zapewnia atraumatyczną zmianę opatrunku i zmniejszenie ryzyka maceracji oraz infekcji.	Wraz z pompą tworzy system podciśnieniowej terapii do odprowadzania wysięku z ran głębokich - odleżyn.	Zawartość: Gąbka w rozmiarze 8 x 10 x 3 Port transferowy Opatrunek w rozmiarze: 20 x 27
Opatrunek Avance® Solo Adapt 	Przezroczysty, elastyczny, wodoodporny opatrunek foliowy z możliwością przycięcia z silikonową warstwą kontaktową Safetac® która zapewnia atraumatyczną zmianę opatrunku i zmniejszenie ryzyka maceracji oraz infekcji.	Wraz z pompą i gąbką Avance® Solo Adapt tworzy system podciśnieniowej terapii do odprowadzania wysięku z ran głębokich - odleżyn.	Rozmiar: 20 x 27
Gąbka Avance® Solo 	Gąbka Avance® Solo jednorazowego użytku zbudowana z poliuretanu do wypełniania ran.	Do wypełnienia żyzyska rany z możliwością docięcia.	Rozmiar: 1,5 x 10 x 12

PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI DOCINANIA I DOPASOWANIA OPATRUNKÓW:

Mepilex®, Mepilex® Transfer

Pięta



Przestrzenie międzypalcowe stóp




Paluch



Palce dłoni i stóp



Przestrzenie międzypalcowe

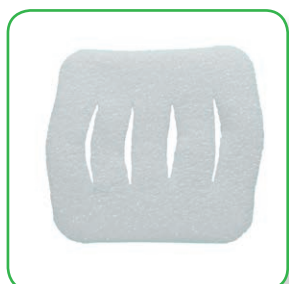


Łokieć




Dół pachowy



Ucho

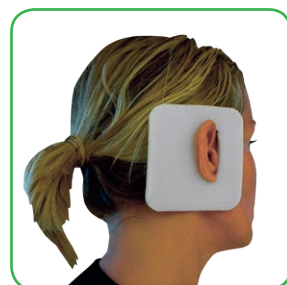


Dreny i kaniule

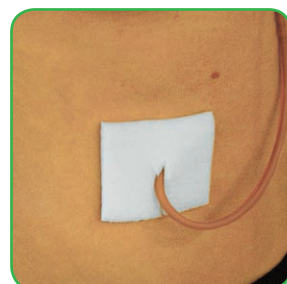

Mepilex® Border Flex Lite

Kciuk

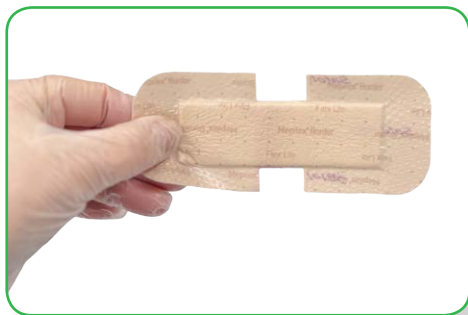

Paluch



Pięta



Łokieć



Ucho



TO RANA DECYDUJE O DOBORZE OPATRUNKU

ETAP	SUCHA MARTWICA	MARTWICA ROZPŁYWNĄ	RANA GŁĘBOKA Z INFЕКCJĄ	RANA PŁASKA Z INFЕКCJĄ	RANA Z ZIARNINĄ	RANA NASKÓRKUJĄCA
CEL	upłynnienie martwicy, wsparcie autoocyszczania	autoocyszczanie, demarkacja tkanki nekrotycznej, kontrola obciążenia mikrobiologicznego	opanowanie infekcji i stanu zapalnego, działanie przeciwbiofilmowe	opanowanie infekcji i stanu zapalnego, działanie przeciwbiofilmowe	ochrona ziarniny, wsparcie naskórkowania	ochrona i pielęgnacja naskórka
Oczyszczanie rany	Granudacyn® (żel)	Granudacyn® (roztwór)	Granudacyn® jest bezpieczny i służy do oczyszczania i nawilżania ran przewlekłych, ostrych, chirurgicznych i zanieczyszczonych, a także oparzeń (I i II stopień). Może być stosowany na wrażliwych tkankach, takich jak chrząstki, ścięgna, więzadła i kości, lub w uchu, jamie ustnej, otrzewnej i przetokach.			
1	Mepilex® Border Ag	Mepilex® Ag	Exufiber® Ag+ + Mepilex® Ag	Mepilex® Ag	Mepilex® Border Flex Lite lub Mepilex® EM	
2		Exufiber® Ag+ + Mepilex® Ag	Mepilex® Ag	Mepilex® Border Ag	Mepilex® Border Flex Lite lub Mepilex® EM	
3		Exufiber® Ag+ + Mepilex® Border Ag				
4		Exufiber® Ag+ + Mextra® Superabsorbent				



Dowiedz się więcej www.molnlycke.pl

Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o. / Biuro Handlowe: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa
Obsługa Klienta (+48) 22 350 52 80 / mail@molnlycke.com

Znaki firmowe, nazwy i logo Mölnlycke, Mepilex, Mepitel, Exufiber, Mextra, Mepiform, Mepitac, Setopress, Granudacyn, Granulox, Tubifast, Epaderm i Safetac są zarejestrowane globalnie w ramach grupy Mölnlycke Health Care Group of Companies. © 2020. Mölnlycke Health Care AB. Wszystkie prawa zastrzeżone. WC_katalog_04/2024